

signo  vines®

SEJA
VOCÊ

 SISTEMA
INFRA®



O Sistema de Implantes Infra vai além de uma excepcional superfície, é a verdadeira evolução do implante com diferenciais que vão te surpreender.

The Infra Implant System goes beyond an exceptional surface, the true evolution with differentials that will surprise you.

El Infra Implant System va más allá de una superficie excepcional, es la verdadera evolución, con diferenciales que lo sorprenderán.



O SISTEMA DE IMPLANTE QUE IRÁ REVOLUCIONAR SUA FORMA DE TRABALHAR.

THE IMPLANT SYSTEM THAT WILL REVOLUTIONIZE THE WAY YOU WORK.

EL SISTEMA DE IMPLANTES QUE REVOLUCIONARÁ SU FORMA DE TRABAJAR.


PARA APLICAÇÕES DIVERSAS

FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS
PARA APLICACIONES VARIAS

**CONEXÃO
CONE MORSE**
MORSE CONE CONNECTION
CONEXIÓN CONO MORSE

IMPLANTE CÔNICO
CONICAL IMPLANT
IMPLANTE CÓNICO

SUPERFÍCIE VELLOX[®]
VELLOX[®] SURFACE
SUPERFÍCIE[®] VELLOX

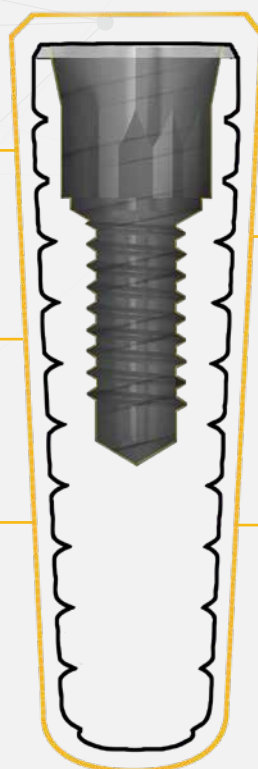

PLATAFORMA SWITCH
SWITCH PLATFORM
PLATAFOMA SWITCH

**INDICADO PARA
TODOS OS TIPOS DE OSSO**
SUITABLE FOR ALL BONE TYPES
ADECUADO PARA TODOS
LOS TIPOS DE HUESOS

ROSCA TRAPEZOIDAL:
Princípio de câmara de coágulo,
acelerando a osseointegração
TRAPEZOIDAL THREAD:
Clot chamber principle,
accelerating osseointegration.
ROSCA TRAPEZOIDAL:
PRINCIPIO DE CÁMARA DE COÁGULO,
ACELERANDO LA OSEOINTEGRACIÓN.

PLATAFORMA SWITCH

SWITCH PLATFORM | PLATAFOMA SWITCH

Plataforma protética CONE MORSE + DODECÁGONO INTERNO
Desenho de plataforma cervical expandida, "platform switch", preserva o espaço biológico peri-implantar, diminui a reabsorção óssea vertical, diminuindo as recessões gengivais.

MORSE TAPER Prosthetic Platform + TWELVE-SIDES INTERNAL INDEXING
The expanded design of the cervical platform, "platform switch", preserves the peri-implant biological space, reduces vertical bone resorption, decreasing gingival recessions.

Plataforma Protésica CONO MORSE + DODECÁGONO INTERNO
El diseño ampliado de la plataforma cervical, "platform switch", preserva el espacio biológico periimplantario, reduce la reabsorción ósea vertical, disminuyendo las recesiones gingivales.

ROSCA TRAPEZOIDAL PELO CORPO INTEIRO DO IMPLANTE

TRAPEZOIDAL THREAD THROUGHOUT THE ENTIRE IMPLANT BODY
ROSCA TRAPEZOIDAL EN TODO EL CUERPO DEL IMPLANTE

As roscas trapezoidais não provocam compressão óssea por interferência, formam com o osso câmara de coágulo que diminuem o tempo de neoformação óssea e proporcionam o aumento da qualidade deste osso, mais que nos implantes convencionais de roscas triangulares com interferência.

Trapezoidal threads do not cause bone compression by interference, they form clot chambers with the bone that decrease the time for bone neoformation and provide an increase in the quality of this bone more than conventional implants with interference triangle threads.

Las roscas trapezoidales no provocan compresión ósea por interferencia, forman cámaras de coagulación con el hueso que disminuyen el tiempo de neoformación ósea y proporcionan un aumento de la calidad de este hueso más que los implantes convencionales con roscas triangulares de interferencia.



DUPLO PROTOCOLO DE INSTALAÇÃO

TWO PROTOCOL INSTALLATION | DOBLE PROTOCOLO DE INSTALACIÓN

A decisão para o posicionamento apico-coronal do implante deixa de ser uma necessidade do sistema e torna-se uma preferência clínica.

The decision for the apico-coronal positioning of the implant is no longer a system requirement and becomes a clinical preference.

La decisión del posicionamiento apico-coronal del implante deja de ser una necesidad del sistema y se convierte en una preferencia clínica.

Plataforma Platform . Plataforma	Ø corpo Ø body . Ø cuerpo	8.5	10.0	11.5	13.0	15.0
CM	Ø 3.3mm	21.231	21.232	21.233	21.234	21.235
CM	Ø 3.8mm	21.241	21.242	21.243	21.244	21.245
CM	Ø 4.6mm	21.341	21.342	21.343	21.344	21.345

Os implantes são vendidos com o seu tapa implante

Implants are sold with their implant cover | Los implantes se venden con su funda de implante

signo vences®

SIMPLICIDADE



SISTEMA *Integra*®

HEXÁGONO EXTERNO

PRATICIDADE



SISTEMA *Duo*®

HEXÁGONO EXTERNO

INTEGRAÇÃO



SISTEMA *ARES*®

HEXÁGONO EXTERNO

SOLUÇÃO



SISTEMA *Compact*®

CONE MORSE

DESIGN



SISTEMA *Duocon*®

CONE MORSE

INOVAÇÃO



SISTEMA *INFRA*®

CONE MORSE

MATRIZ: SIGNO VINCES EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

0800 600 5999 | +55 41 3032.5999

Rod. Raul Azevedo de Macedo, 733 | Campo Largo / PR | Brasil | 83606-482

signovinces@signovinces.com.br | www.signovinces.com.br